



ISTRUZIONI PER L'USO

Questo foglietto illustrativo ha lo scopo di informare gli utilizzatori delle lenti a contatto morbide idrofiliche daily disposable Bausch + Lomb su come indossarle e averne cura.

Ciò è applicabile a:


NOME PRODOTTO	MATERIALE	CONTENUTO D'ACQUA	SOLUZIONE DI CONFEZIONAMENTO
Lenti a contatto con colorazione di visibilità (hilafilcon B) SofLens® daily disposable	Hilafilcon B	59% in peso	Soluzione salina tamponata con borato e con poloxamina
Lenti a contatto con colorazione di visibilità (hilafilcon B) toriche SofLens® daily disposable			
Lenti a contatto cosmetiche (hilafilcon B) Naturelle™ daily disposable			
Lenti a contatto con colorazione di visibilità Biotrue® ONEday (nesofilcon A)	Nesofilcon A	78% in peso	
Lenti a contatto con colorazione di visibilità Biotrue® ONEday for Presbyopia (nesofilcon A)			
Lenti a contatto con colorazione di visibilità Biotrue® ONEday for Astigmatism (nesofilcon A)			

Indicazioni

Le lenti a contatto (hilafilcon B e nesofilcon A) Bausch + Lomb sono indicate per il porto giornaliero per la correzione dell'ametropia refrattiva (miopia, iperopia, astigmatismo), presbiopia e per la riduzione dell'aberrazione sferica nei pazienti afachici e/o non afachici con occhi sani che presentano astigmatismo refrattivo uguale o inferiore a 2,00 diottrie (la potenza diottrica delle lenti a contatto SofLens® daily disposable toriche e Biotrue ONEday For Astigmatism è di 5,00 diottrie o meno), che non interferisce con l'acuità visiva. Le lenti sono da prescrivere come lenti monouso per potenze diottriche sferiche comprese tra +20,00 D e -20,00 D e devono essere gettate dopo ogni utilizzo.

Descrizione e applicazione

Le lenti sono indicate per l'uso giornaliero, sono monouso e devono essere gettate dopo ogni periodo di utilizzo. Il riutilizzo delle lenti in assenza di pulizia e disinfezione può essere causa di infezioni e/o gravi lesioni oculari. Attenersi sempre alla frequenza di utilizzo raccomandata dal proprio Contattologo di fiducia.

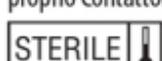

Le lenti sono fornite sterili e sono indicate, in linea con le istruzioni fornite dal produttore, per un periodo di utilizzo massimo di un giorno. Le lenti sono sterilizzate a vapore.

NON UTILIZZARE se la confezione è aperta o danneggiata.

Istruzioni per l'inserimento e la rimozione

Prima di toccare le lenti, lavare e asciugare sempre accuratamente le mani, evitando di utilizzare saponi profumati e terapeutici. Porre la lente nel palmo della mano. Accertarsi che la lente sia nella posizione corretta.



Ispezionare la lente prima di inserirla e non inserirla nel caso in cui sia graffiata o danneggiata.

Per rimuovere la lente, verificare di avere le mani pulite e asciutte, utilizzare un dito per far scorrere la lente in basso fino alla parte bianca dell'occhio e poi rimuoverla. Utilizzare gocce umettanti nel caso in cui la lente sia difficile da rimuovere. Dopo la rimozione dall'occhio, gettare sempre le lenti.

Cura delle lenti

- Prima di toccare le lenti, lavare e sciacquare le mani.
- Impedire che cosmetici, lozioni, detergenti, creme o sostanze profumate entrino in contatto con gli occhi e con le lenti.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati oppure le unghie per rimuovere le lenti dai contenitori o dagli occhi.
- Gettare sempre le lenti dopo la rimozione.

Avvertenze e precauzioni

Il mancato rispetto della frequenza di utilizzo raccomandata dal proprio contattologo di fiducia e del regime di pulizia può aumentare notevolmente il rischio di gravi infezioni oculari.

Non indossare lenti monouso giornaliere per più di un giorno o durante il sonno.

Non indossare le lenti a contatto nel caso in cui si soffre di:

- Allergie, infiammazioni, infezioni o rossore dell'occhio o intorno all'occhio;
- Secchezza oculare (liquido lacrimale non adeguato);
- Patologie che abbiano influenza sugli occhi, ad es. raffreddori e influenze;
- Malattie sistemiche che abbiano effetti sugli occhi.

Contattare il proprio contattologo di fiducia prima di indossare le lenti:

- Per praticare sport acquatici;
- In ambienti eccessivamente secchi o polverosi;
- Quando si utilizzino farmaci per gli occhi.

Rimuovere le lenti immediatamente nel caso si verifichi una qualunque delle seguenti condizioni:

- Dolore puntorio, bruciore, prurito, irritazione o altri dolori localizzati all'occhio
- Comfort ridotto in relazione alle volte precedenti in cui sono state indossate le lenti
- Secrezioni insolite o lacrimazione eccessiva
- Rossore degli occhi
- Secchezza degli occhi grave o persistente
- Riduzione o sfocamento della visione
- Aloni o riflessi attorno alle luci
- Sensibilità alla luce

Se uno qualunque di tali sintomi persiste dopo la rimozione delle lenti e l'inserimento di lenti nuove, rimuovere le lenti e contattare il proprio Professionista della visione di fiducia. Se ignorati, tali sintomi possono essere causa di condizioni più gravi.

Precauzioni e avvertenze aggiuntive per le lenti a contatto Biotrue® ONEday (nesofilcon A):

Avvertenza: le lenti a contatto con protezione UV NON sostituiscono gli occhiali con protezione UV, quali gli occhiali da sole o quelli a mascherina con filtro UV, poiché non coprono completamente l'occhio e la zona circostante. Lei deve continuare a utilizzare gli occhiali da sole con filtro UV, come indicato.

Nota: l'esposizione prolungata alle radiazioni UV costituisce uno dei fattori di rischio associati alla cataratta. L'esposizione è basata su un certo numero di fattori come le condizioni ambientali (altitudine, luogo geografico, nuvolosità) e fattori personali (entità e natura delle attività all'aperto). Le lenti a contatto con filtro UV aiutano a fornire protezione contro le radiazioni UV nocive.

Nota: l'efficacia dell'utilizzo delle lenti a contatto con protezione UV nella prevenzione o nella riduzione dell'incidenza di disturbi oculari associati all'esposizione ai raggi UV non è stata stabilita allo stato attuale. Tuttavia, non sono stati effettuati studi clinici per dimostrare che l'utilizzo di lenti a contatto con filtro UV riduca il rischio di sviluppare la cataratta o altri disturbi oculari. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio Contattologo di fiducia.

Guida di riferimento per simboli, etichette e confezioni



Imposta pagata per lo smaltimento rifiuti in linea con la direttiva 94/62/CE



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY, 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Data di emissione: 2017-07-26



0050 Indica il marchio di conformità CE e il numero dell'ente di notifica




Non riutilizzare



1°C / 34°F Limite inferiore di temperatura



Vedere le istruzioni d'uso

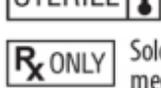

Sterilizzato a vapore o calore secco



Solo per gli Stati Uniti: La legge federale limita la vendita di questo dispositivo a un medico o dietro presentazione di prescrizione medica

®/™ sono marchi di Bausch & Lomb Incorporated o di sue affiliate.

© Bausch & Lomb Incorporated.